

Oikea ommelaine jokaiseen ompeleeseen

B. Braunin suositukset



B. BRAUN VET CARE

Oikea ommelaine jokaiseen ompeleeseen

B. Braunin suositukset

INDIKAATIO	LANKA	TUOTENUMERO	TUOTEKUVAUS	PAKKAUS
 PEHMYT-KUDOSKIRURGIA, PARENKYMIKUDOS	Monofilamentti, keskipitkällä aikavälillä resorboituva	C2022014	Monosyn® violetti USP 4/0, pituus: 70 cm, neula: HR22, Racepack	36 kuorta
		C2022025	Monosyn® violetti USP 3/0, pituus: 70 cm, neula: HR26, Racepack	36 kuorta
		C2022036	Monosyn® violetti USP 2/0, pituus: 70 cm, neula: HR30, Racepack	36 kuorta
 INTRAKUTAANI-OMMEL	Monofilamentti, keskipitkällä aikavälillä resorboituva	C2022204	Monosyn® violetti USP 4/0, pituus: 70 cm, neula: DS19, Racepack	36 kuorta
		C2022215	Monosyn® violetti USP 3/0, pituus: 70 cm, neula: DS24, Racepack	36 kuorta
 LIGATUURAT	Multifilamentti, keskipitkällä aikavälillä resorboituva	C0058409	Novosyn® violetti USP 1, pituus: 2 x 70 cm	36 kuorta
 ABDOMINAALIN SULKU / LINEA ALBA	Monofilamentti, pitkällä aikavälillä resorboituva	C2024037	MonoPlus® violetti USP 0, pituus: 70 cm, neula: HR30, Racepack	36 kuorta
		C2024058	MonoPlus® violetti USP 1, pituus: 70 cm, neula: HR37S, Racepack	36 kuorta
 IHO RESORBOITUMATON	Monofilamentti, resorboitumaton	C0935204	Dafilon® sininen USP 4/0, pituus: 75 cm, neula: DS19	36 kuorta
		C0935352	Dafilon® sininen USP 3/0, pituus: 75 cm, neula: DS24	36 kuorta
 SARVEISKALVO	Monofilamentti, resorboitumaton	G1118722	Dafilon® musta USP 10/0, pituus: 15 cm, neula: DLM6	12 kuorta

Oikea ommelaine jokaiseen ompeleeseen


B. Braunin suositukset

INDIKAATIO	LANKA	TUOTENUMERO	TUOTEKUVAUS	PAKKAUS
 RIPSIRAJA	Monofilamentti, keskipitkällä aikavälillä resorboituva	C2022204	Monosyn® violetti USP 4/0, pituus: 70 cm, neula: DS19	36 kuorta
 HERNIAT	Monofilamentti, resorboitumaton	C3090041	Optilene® USP 3/0, pituus: 75 cm, neula: HR26, Racepack	36 kuorta
 VERIKORVA	Monofilamentti, resorboitumaton	C0932655	Dafilon® sininen USP 3/0, pituus: 75 cm, neula: GS60	36 kuorta
 NIVELKAPSELI	Monofilamentti, pitkällä aikavälillä resorboituva	C0024131	MonoPlus® violetti USP 2/0, pituus: 70 cm, neula: HR17S	36 kuorta
 HAMMASKIRURGIA	Monofilamentti, lyhyellä aikavälillä resorboituva	C0025052	Monosyn® Quick väritön USP 4/0, pituus: 70 cm, neula: HR17	36 kuorta
 PEHMYT- KUDOSKIRURGIA, PARENKYMIKUDOS & HAMMASKIRURGIA	Monofilamentti, keskipitkällä aikavälillä resorboituva	C2022004	Monosyn® violetti USP 4/0, pituus: 70 cm, neula: HR17, Racepack	36 kuorta


Oikea ommelaine jokaiseen ompeleeseen

B. Braunin suositukset

NEULAN KAAREVUUS

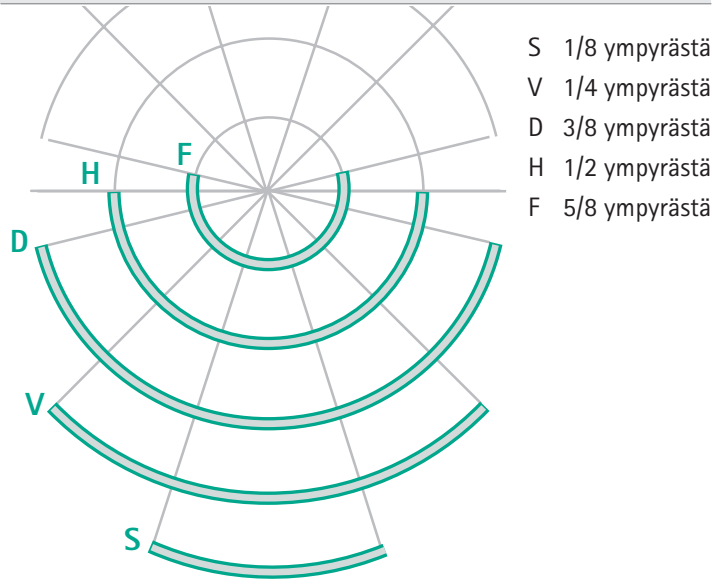

MUUT

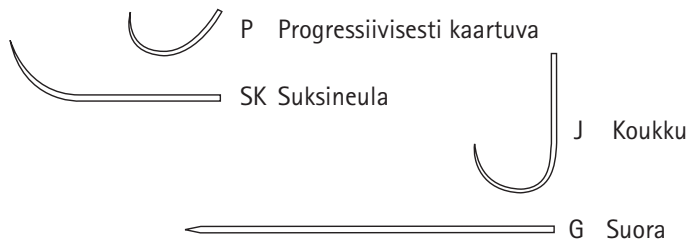

B. BRAUNIN NEULATERMINOLOGIA

Neulan kaarevuus	Runkotyyppi	Neulan kärki	Neulan pituus	Neulan vahvuus
S 1/8 ympyrästä	G Kiilamainen mikrokaiverrettu	T Troakaari	Neulan pituus mitattuna neulan kärjestä neulan kantaan on neulan pituus mm:nä	f Ohut neula
V 1/4 ympyrästä	R Pyöreä neula	N Tylppä		ff Superohut neula
D 3/8 ympyrästä	S Leikkaava neula	S Leikkaava		s Vahva neula
H 1/2 ympyrästä	L Lansetti	C Hiottu kärki		ss Supervahva neula
F 5/8 ympyrästä		M Mikrokärki		v Take-off neula
G Suora		MP Tarkkuushiottu		b Musta neula
P Progressiivisesti kaartuva				m Mikro
J Koukku				mV Mikrovaskulaarinen
SK Suksineula				

Esimerkki

HRT 37s = 1/2 ympyrästä, pyöreä neula, troakaari kärki, 37 mm pitkä, vahva neula